


## Contador Hematológico

### “URIT 3000plus”

URIT 3000 plus es un contador hematológico manual de 21 parámetros, con diferenciación de 3 líneas celulares de leucocitos.

#### Alto rendimiento

- Alto rendimiento: 60 muestras por hora, entrega cada resultado dentro de los 60 segundos.
- El sistema hidráulico se limpia automáticamente de partículas al encender el analizador.
- Los pulsos de alto voltaje después de cada medición mantienen las aperturas libres de obturaciones.
- El instrumento limpia automáticamente el interior y exterior de la aguja de muestreo luego de cada aspiración de sangre para reducir al mínimo el riesgo de contaminaciones por arrastre de la muestra anterior.

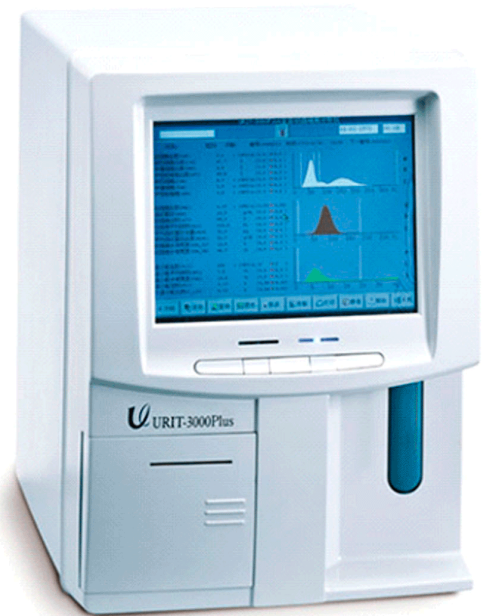

#### Fácil Uso

- La gran pantalla LCD, el teclado externo y el mouse, permiten la entrada de datos y el monitoreo rápido de los resultados con histogramas.
- El equipo brinda sofisticadas características y un fácil sistema de funcionamiento, con un menú multilingüe. Provee 4 métodos de QC, Gráficos L-J y funciones de diagnósticos que permiten total confiabilidad y precisión.
- Se pueden interconectar con el host de su computadora para el proceso de administración de datos. Los resultados se pueden también recuperar en la impresora incorporada.
- Posee una amplia diversidad de menús de mantenimiento, incluyendo alto voltaje, flujos bidireccionales de alta presión, autolimpieza del sistema hidráulico, etc.

